

■本製品をご使用になる際は、必ず医師の指示に従ってください。

はじめに


本製品は定量噴霧吸入器 (MDI) による吸入を補助するステンレス製スプレーです。幅広い年齢層にお使いいただけるよう、マスクとマウスピースの2タイプの使い方が可能です。MDIの携帯性を維持しつつ、吸入を最適にします。

ステンレス・スプレー 取扱説明書

主な特性

- 患者が息を吸うとき吸気バルブは開き、呼気バルブは閉じます。また、息を吐き出すときに呼気バルブが開く構造になっています。
- 静電気を生じさせないステンレス製ですので、噴霧された薬剤が静電気によってスプレー内に付着するのを防ぎます。
- 安全なポリプロピレンとシリコンを使用しています。

注意! ・ 医師の指示に従い、このスプレーを正しくお使いください。
・ 使用前に、異物が付着していないか確認をしてください。
・ この製品は一人の患者が使用し、それ以外の人と共用しないでください。

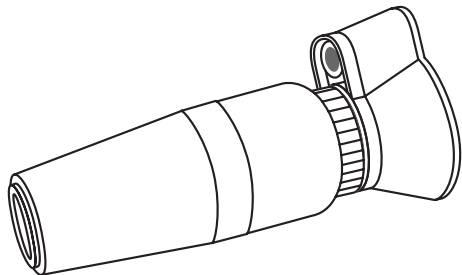

標準セット内容

- a スプレー本体上部
- b スプレー本体下部
- c マウスピース
- d マスク
- e アダプター

